

RÖTZMEIER

SICHERHEITSBEHÄLTER

Utiliser, stocker et transporter des produits dangereux – avec les récipients de sécurité Rötzmeier en acier inoxydable!



Rötzmeier Sécurité

Les récipients de sécurité Rötzeier

- protègent d'une manière sûre lors des manipulations de liquides inflammables et autres produits dangereux au laboratoire et dans l'industrie
- sont des récipients avec une très longue vie utile
- sont résistants aux produits chimiques grâce à l'utilisation d'aciers inoxydables de haute qualité et de joints en PTFE (Polytétrafluoréthylène)
- avec protection antiexplosion: pare-flammes, soupapes de sécurité, ainsi que bec doseur pour un dosage fin et fermeture automatique ^{01D}
- conformes aux réglementations correspondantes (par ex. règles techniques pour les liquides inflammables (TRbF), TÜV, Factory Mutual (FM), etc.)
- sont recommandés par les associations professionnelles, par ex. dans règles pour le travail dans les laboratoires
- sont des produits de qualité „Made in Germany“



- Pour un transvasement sécurisé et le dosage de petites quantités de liquides inflammables sur le lieu de travail
- Fabriqués en acier inoxydable de 0,6 mm, joints en PTFE, poignée en aluminium avec peinture époxy
- Disponibles en version laboratoire (poli, comme sur la photo supérieure) ou en version entreprise (non poli, similaire au produit SP2 situé à gauche, numéro de réf. avec un „U“ final)



Bidons de sécurité	Vol. l	Réf.
avec bec doseur de précision 1¼"	1	01D 01DU
avec bec doseur de précision 1¼"	2	02D 02DU
avec bec doseur de précision 1¼"	5	05D 05DU
avec bouchon fileté 1¼"	1	01K 01KU
avec bouchon fileté 1¼"	2	02K 02KU
avec bouchon fileté 1¼"	5	05K 05KU
Mouilleurs (avec coupe de trempage et pompe 1¼")	1	SP1
Mouilleurs (avec coupe de trempage et pompe 1¼")	2	SP2



Jerricans de sécurité

pour un usage interne dans l'entreprise



- pour le transvasement, le dosage et le stockage de liquides inflammables en toute sécurité
- en acier inoxydable de 0,8 mm, poignée également en acier inoxydable massif, joints en PTFE
- la forme rectangulaire permet d'économiser l'espace nécessaire pour le stockage de quantités importantes par ex. dans les armoires de sécurité
- modèle avec bec doseur pour un stockage horizontal et transvasement; avec vis d'aération séparée

Jerricans de sécurité	Vol. l	Réf.
avec bec doseur de précision 1½"	5	05KD
avec bec doseur de précision 1½"	10	10KD
avec bec doseur de précision 1½" et aération séparée	20	20KDL
avec bouchon fileté 1½"	5	05KK
avec bouchon fileté 1½"	10	10KK
avec bouchon fileté 1½"	20	20KK
avec bec doseur 1½" et aération séparée	5	05KZ
avec bec doseur 1½" et aération séparée	10	10KZ
avec bec doseur 1½" et aération séparée	20	20KZ

Fûts de sécurité

pour un usage interne dans l'entreprise



- pour un stockage sécurisé de quantités importantes de produits dangereux
- peuvent être utilisés également pour le transvasement et le dosage
- réalisés en acier inoxydable de 0,8 à 1,5 mm d'épaisseur (dépendant du volume)
- les modèles de 25l et 50l peuvent s'empiler
- joints en PTFE, jauges de niveau en PFA (Perfluoroalkoxy)
- disponibilité de bidons de 100 et 200l pour un entreposage fixe

Fûts de sécurité	Vol. l	Réf.
avec bouchon fileté 1½"	10	10K
avec bouchon fileté 1½"	25	25K
avec bouchon fileté 2" TPI	50	50K
avec bec doseur ¾" et aération séparée	10	10Z
avec bec doseur ¾" et aération séparée	25	25Z
avec bec doseur ¾" et aération séparée	50	50Z
avec bec doseur ¾", aération séparée et jauge de niveau	10	10ZI
avec bec doseur ¾", aération séparée et jauge de niveau	25	25ZI
avec bec doseur ¾", aération séparée et jauge de niveau	50	50ZI
avec bec doseur de précision et aération séparée	10	10D
avec bec doseur de précision, aération séparée et jauge de niveau	10	10DI
Bidon collecteur, connexion de 2"	10	10S
Bidon collecteur, connexion de 2", avec jauge de niveau	10	10SI
Récipients de lavage pour le nettoyage de pièces	4	WB4
Récipients pour tremper des chiffons	4	TB4


Réipients de sécurité

pour le transport (avec homologation UN)



- Réipients spéciaux pour un transport sécurisé de substances dangereuses avec tous les moyens de transport
- homologation UN selon GGVSEB, GGVMarit. ainsi que ADR, RID, IMDG Code ou ICAO-TI, homologués pour tous les produits dangereux (Type d'emballage X)
- réalisés en acier inoxydable de 0,6 à 1,2 mm (dépendant du modèle), joints en PTFE
- équipés d'un dispositif pare-flamme et d'un bouchon fileté, sans soupape de compensation – disponibles également avec soupape de compensation (ajouter dans ces cas un „V” à la référence, par ex. 10KTV)
- 25TZ également avec bec doseur Z150 pour entreposage horizontal

Réipients de sécurité	Vol. l	Réf.
Bidon pour le transport	1	01T
Bidon pour le transport	2	02T
Bidon pour le transport	5	05T
Jerrican pour le transport	5	05KT
Jerrican pour le transport	10	10KT
Jerrican pour le transport, avec aération séparée	20	20KTL
Fût pour le transport	25	25TZ

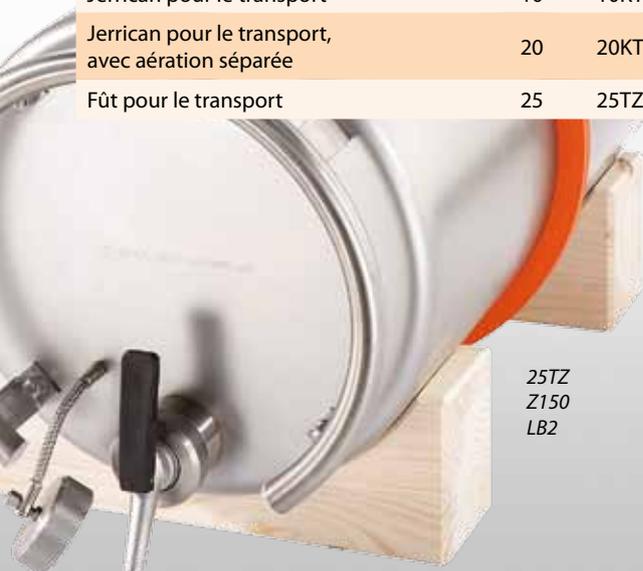

Entonnoirs en acier inoxydable

pour bidons en plastique DIN, bidons collecteurs, bidons avec 2" et tous les réipients de Rötzmeier

Entonnoirs de sécurité pour réipients en plastique

Entonnoirs de sécurité pour bidons collecteurs en acier inoxydable



Entonnoirs




- Entonnoirs de sécurité se vissant sur le réipient (connexion continue), avec une prise de terre additionnelle, une protection anti-flamme et anti-débordement ainsi qu'un couvercle pour réduire les odeurs
- Entonnoirs de la série TK permettant un remplissage facile et sûr de réipients de plastique DIN
- Entonnoirs TS et T182 pour bidons collecteurs (filetage grossier)
- Entonnoirs de sécurité sans filetage se placent directement dans les réipients de Rötzmeier

Entonnoirs en acier inoxydable	Réf.
Entonnoir de sécurité avec couvercle en plastique (PE) DIN50	TK50
Entonnoir de sécurité plat avec couvercle en plastique (PE) DIN50	TK50-180
Entonnoir de sécurité avec couvercle en plastique (PE) DIN51	TK51
Entonnoir de sécurité plat avec couvercle en plastique (PE) DIN51	TK51-180
Entonnoir de sécurité avec couvercle en plastique (PE) DIN61	TK61
Entonnoir de sécurité plat avec couvercle en plastique (PE) DIN61	TK61-180
Entonnoir de sécurité avec couvercle en plastique (PE) DIN71	TK71
Entonnoir de sécurité plat avec couvercle en plastique (PE) DIN71	TK71-180
Entonnoir de sécurité avec filetage 2"	T2
Entonnoir de sécurité avec filetage 2", modèle plat	T180
Entonnoir de sécurité avec filetage grossier 2"	TS
Entonnoir de sécurité avec filetage 2", modèle plat	T182
Entonnoir sans filetage pour tous les types de réipients de sécurité	TR1
Entonnoir sans filetage pour tous les types de jerricans	TR2
Entonnoir pour tous les types de jerricans, avec filetage	TR2V
Entonnoir pour tous les types de bidons de sécurité	TR3



Accessoires

pour les récipients de sécurité Rötzmeier

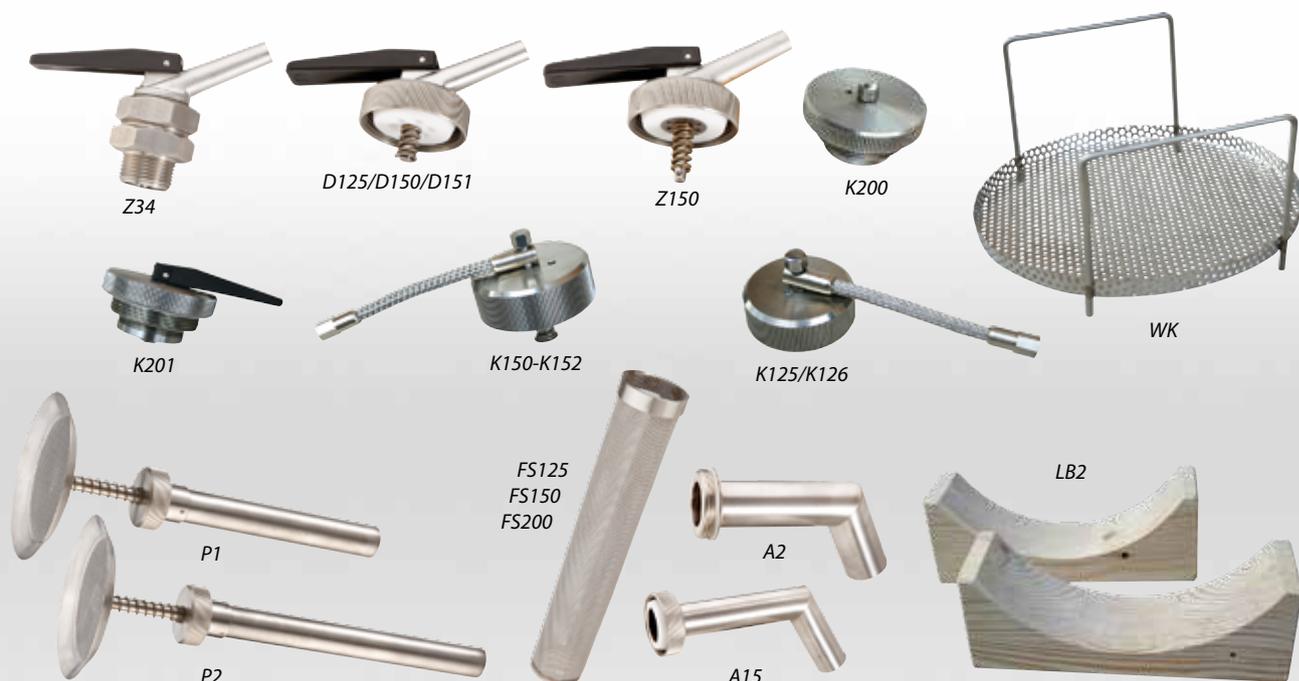

Accessoire	pour	Réf.
Dispositif de pompage avec coupe de trempage	tous les bidons de sécurité de 1l	P1
Dispositif de pompage avec coupe de trempage	tous les bidons de sécurité de 2l	P2
Bec doseur 2"	les bidons collecteurs 10S et 10SI	A2
Bec doseur 1½"	tous les jerricans et les bidons de sécurité de 10l et 25l	A15
Robinet de soutirage avec fermeture automatique ¾"	les bidons de sécurité	Z34
Robinet de soutirage avec fermeture automatique 1½"	les jerricans 05KZ, 10KZ, 20KZ, 20KDL et le fût de transport 25TZ	Z150
Bec doseur de précision avec fernet. aut. 1¼" avec aération	tous les bidons de sécurité	D125
Bec doseur de précision avec fernet. aut. 1½" avec aération	les jerricans 05KD, 10KD, 05KK, 10KK et 10K	D150
Bec doseur de précision avec fermeture aut. 1½"	10D, 10DI, 20KDL, 20KTL, 05KZ, 10KZ, 20KZ	D151
Bouchon fileté 1¼" avec aération	les bidons de sécurité	K125
Bouchon fileté 1¼"	tous les bidons de sécurité pour le transport	K126
Bouchon fileté 1½" avec aération	les jerricans + 10D, 10DI, 10K, 25K	K150
Bouchon fileté 1½" avec manette d'aération	les fûts de sécurité 10Z, 10ZI, 25Z, 25ZI	K151
Bouchon fileté 1½"	tous les récipients pour le transport + 25TZ	K152
Bouchon fileté 2" TPI avec aération	le fût de sécurité 50K	K200
Bouchon fileté 2" TPI avec manette d'aération	les fûts de sécurité 50Z et 50ZI	K201
Bouchon fileté 2" Tri-Sure	les bidons collecteurs 10S et 10SI	K2
Dispositif anti-flamme	tous les bidons de sécurité	FS125
Dispositif anti-flamme	tous les jerricans et les fûts de sécurité de 10l et 25l	FS150
Dispositif anti-flamme	les fûts de sécurité de 50l	FS200
Support pour lavage	le bac de lavage WB4	WK
Supports en bois (2 unités)	le fût de sécurité pour le transport 25TZ	LB2

RÖTZMEIER

SICHERHEITSBEHÄLTER



L'entreprise

Notre entreprise familiale se trouve depuis sa création dans la ville de Salzkotten (région de Paderborn / Bielefeld). Nos produits sont des produits de qualité „Made in Germany“; nos fournisseurs sont principalement de notre région. Nous avons plus de 45 ans d'expérience dans l'utilisation de l'acier inoxydable, avec une recherche constante de l'innovation et l'amélioration des techniques de sécurité, ce qui nous permet d'offrir des produits d'excellente qualité et sécurité pour la manipulation de substances dangereuses.

Les utilisateurs de nos produits sont principalement les laboratoires de l'industrie, les fabricants de produits chimiques et pharmaceutiques, les organismes de recherche ainsi que les universités du monde entier. Les produits typiques pour remplir nos récipients de sécurité sont les solvants. Nous nous ferons un plaisir de nous orienter sur l'adaptation de nos produits à vos nécessités individuelles. Vous pouvez utiliser notre savoir faire pour trouver des solutions à vos problèmes.

■ Made in Germany
■ Made in Salzkotten